



SCHMITZ

A Sense of Confidence

Partura®
Il letto da parto Schmitz
comodo e sicuro –
per un'ostetricia preventiva



Partura® confortevole e versatile, in tutta sicurezza



Progetto: Karin Berghammer/
Iris Podgorschek
Design: podpod design

Il letto da parto è concepito in modo da lasciare alla gestante la maggior libertà di movimento possibile durante la fase di travaglio e di espulsione. Un meccanismo azionabile manualmente consente la regolazione in continuo del letto, così la gestante può modificarne da sola la posizione. La morbida superficie imbottita su cui è distesa la partoriente è abbastanza ampia da consentire un supporto attivo da parte del partner. La parte inferiore del letto può essere anche utilizzata dall'ostetrica come sgabello.

Nell'odierna prassi ospedaliera non conta soltanto offrire un'assistenza medica affidabile, ma anche soddisfare pienamente le aspettative dei pazienti.

Il letto da parto Schmitz risponde a tutte le esigenze:

Esso combina un design gradevole all'elevato comfort della gestante e a condizioni ottimali di lavoro del team di assistenza al parto.

Sia il rivestimento del letto, in materiale liscio, che la superficie imbottita sono facilmente lavabili e disinfettabili.

E, qualora fosse necessario, con pochi movimenti il letto può essere regolato in modo da rendere possibile un rapido intervento medico.

Il letto da parto per un parto sicuro ed agevole.

Fase di dilatazione, letto nella posizione più bassa (64 cm). Quest'altezza consente alla gestante di salire e scendere senza difficoltà dal letto in modo da alternare periodi di movimento a periodi di rilassamento.



Fase del travaglio in posizione verticale con partner: la donna può stabilire un contatto corporeo con il partner appoggiandosi a lui.

Parto in posizione classica (posizione di litotomia.)



Parto in posizione accovacciata, ottimizzazione dell'asse di parto, posizione di massima cifosi, non si esercita alcuna pressione sul canale.

Parto con Trendelenburg in caso di distocia delle spalle, interventi o aiuto manuale.



Parto in posizione accovacciata con partner; l'uomo può sollevare leggermente la donna al momento della fuoriuscita della testa del piccolo. Contatto corporeo.

Fase di dilatazione e/o fase intermedia in posizione carponi su ginocchia e gomiti, in caso di stimolo di pressione e di asfissia intrauterina.



Parto con intervento, estrazione con forcipe o ventosa, aiuto manuale in caso di posizione podalica del feto. Post parto per trattamento al canale in caso di distacco manuale della placenta.

Parto in posizione carponi su ginocchia e gomiti, in caso di parto plurimo con precedente 'Epi' per ridurre la pressione sul canale o in caso di dimensioni molto grandi del nascituro.



Parto cesareo in sala operatoria in caso di indicazione assoluta.

Post parto: dopo il parto in posizione carponi su ginocchia e gomiti la donna non ha bisogno di girarsi completamente ma può semplicemente sedersi indietro.



Posizione in caso di choc provocato da prolasso del funicolo ombelicale o da collasso cardiocircolatorio.

Fase del travaglio in comoda posizione eretta, da seduta; grazie all'incavo nel materasso non si verifica alcuna pressione sul canale. La donna non ha bisogno del partner. In caso di posizione podalica del feto è possibile l'aiuto manuale.



Posizione elevata delle gambe per favorire il rilassamento.

Letto da parto Partura® Perfettamente attrezzato

Letto da parto Partura 140.01.101

- Il supporto piedi può essere allontanato dal letto consentendo un migliore accesso alle ostetriche e al medico. Supporto piedi con funzione di sgabello o tavolino.
- Regolazione in altezza sincronizzata e separata del letto e del supporto piedi.
- Pulizia semplice e profonda grazie alle superfici chiuse e lisce, imbottiture rimovibili.
- Mobile su ruote – con bloccaggio centrale.
- 24 colori per creare la propria unica versione.
- Molteplici possibilità di regolazione, molto stabile e spazioso per poter effettuare le più diverse posizioni durante il parto, anche con l'aiuto del partner.
- Regolazioni elettriche tramite 2 pulsanti manuali.
- Corsa fluida e silenziosa delle movimentazioni del letto.
- Schienale multifunzionale inseribile sia al lato testa che al supporto piedi.
- Poggiatesta con snodo per passare rapidamente dalla posizione a scomparsa a quella di utilizzo.
- Sicurezza di funzionamento anche in caso di mancanza di corrente grazie alle batterie.



Verniciatura:

1. colore – giallo segnale RAL 1003
2. colore – alluminio grigiastro RAL 9007



- 1
I poggiamambe possono essere orientati velocemente e inseriti sotto il letto per poi essere riportati alla posizione utile per il trattamento.
- 2
Il poggiaschiena è applicabile anche al supporto piedi.
- 3
Apposito alloggiamento per le maniglie sul lato posteriore in caso di non utilizzo.
- 4
Interruttore principale, presa per nodo equipotenziale, indicatore di carica delle batterie, presa IEC 60320 C13
- 5
L'asta portaflebo può essere inserita nella testata del letto oppure sul lato sinistro o destro.
- 6
Sezione piedi dotata di maniglie per la movimentazione e di leva blocco/sblocco per le ruote.
- 7
Due pulsantiere manuali con cavo a spirale, situati a sinistra e a destra del piano d'appoggio.

Accessori:

- 8
Cuscino 104.01.601
di supporto per la schiena
- Lenzuolo con angoli 104.01.602**
per materasso in due sezioni, bianco, lavabile fino a 95° C
- 9
Barra di sostegno 104.01.603
archetto per travaglio, tubo di acciaio, verniciato a polveri, inclinabile e regolabile in altezza, con due morsetti girevoli in acciaio inox, per montaggio sulle guide laterali
- 10
Sostegni laterali (coppia) 104.01.604
estraibili, in tubolare in acciaio verniciato a polveri, fissaggio in acciaio inox, montati lateralmente allo schienale
- 11
Vaschetta raccogli-liquidi 104.01.605
in acciaio inox, 355 x 325 x 100 mm (lungh. x largh. x prof.)
- 12
Poggiapiedi (coppia) 104.01.606
con fissaggio, in acciaio inox, poggiapiedi in plastica, colore grigio



Letto da parto Partura®

CE

Dotazione standard

Letto da parto Partura modello n. 140.01.101.

Parte principale con sedile e schienale e supporto piedi; montato su ruote piroettanti, bloccaggio centrale.

Sedile con apertura, raggio 150 mm.

Imbottitura divisa in due sezioni per parte principale e supporto piedi in materiale espanso con rivestimento altamente elastico, impermeabilizzato ed antisdrucciolo.

Rivestimenti e struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri. Colori secondo la scheda colori.

1 fodera in due sezioni, di colore bianco, lavabile fino a 95°.

La parte principale ed il supporto piedi sono separabili. Il supporto piedi può essere spinto sotto la parte principale; quattro posizioni di bloccaggio.

Poggiaschiena applicabile sia sul lato della testa che su quello dei piedi, rivestito in similpelle di colore granito 89.

Due poggiamambe metodo Göpel in acciaio inox, regolabili in altezza, imbottitura in espanso integrale di colore grigio argento.

Due giunti a cerniera per l'inserimento dei poggiamambe. Veloce regolazione dalla posizione di attesa alla posizione di fase acuta.

Due maniglie in acciaio inox 18/10, in espanso integrale grigio argento, applicabili lateralmente.

Asta per fleboclisi con 4 ganci, in acciaio inox 18/10, fissabile alla testata del letto e nella zona delle maniglie, regolabile in altezza.

Supporto schienale da applicare in prossimità dell'apertura del sedile, a forma di semiluna, in espanso integrale di colore grigio argento, utilizzabile per parto in posizione accovacciata.

A sinistra e a destra del piano d'uso sono posizionati due pulsantiere manuali con cavo a spirale per la regolazione elettromotrice in continuo del letto:

- Regolazione dell'altezza della parte principale
- Regolazione dello schienale
- Regolazione del sedile
- Inclinazione del letto (posizione in caso di choc)
- Regolazione in altezza del supporto piedi (in collegamento con la parte principale)

Sicurezza di funzionamento anche in caso di mancanza di corrente grazie alle batterie.

Dati tecnici

Regolazione in altezza della parte principale da 645 a 925 mm

Regolazione in altezza del supporto piedi da 460 a 925 mm (solamente in collegamento con la parte principale)

Misure esterne del letto da parto con poggiaschiena inserito
2330 x 1015 mm (lunghezza x larghezza)
Superficie letto 1950 x 950 (lunghezza x larghezza)

Lunghezza materasso schienale 890 mm

Lunghezza materasso sedile 350 mm

Lunghezza materasso supporto piedi 695 mm

Spessore del materasso 80 mm

Angolo di inclinazione piano d'uso 0-12 gradi (posizione in caso di choc)

Angolo di inclinazione schienale 0-78 gradi

Angolo di inclinazione sedile 0-27 gradi

Carico di lavoro sicuro (parte principale) 220 kg

Carico di lavoro sicuro (supporto piedi) 135 kg

Peso supporto piedi 110 kg

Peso parte principale 265 kg

Peso totale 375 kg

Tensione di rete 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 0,76 kW

Classe di protezione I/B

Colori

Imbottitura divisa in due sezioni per parte principale e supporto piedi: granito 89

Imbottitura per poggiaschiena: granito 89

Poggiamambe, maniglie e supporto

schienale: espanso integrale grigio argento




Lamiera d'acciaio: verniciata a polveri

secondo la scheda colori.

Verniciature

	bianco grigiastro RAL 9002
	bianco puro RAL 9010
	grigio alabastro RAL 0007500*
	grigio luce RAL 7035
	grigio antracite RAL 7016
	nero intenso RAL 9005
	alluminio brillante RAL 9006
	alluminio grigiastro RAL 9007
	giallo navone RAL 1009050*
	giallo segnale RAL 1003
	giallo arancione RAL 0506060*
	avorio chiaro RAL 1015
	beige sahara RAL 0607030*
	marrone rame RAL 8004
	rosa antico RAL 3014
	lilla chiaro RAL 3108010*
	verde giada RAL 1808010*
	verde abete RAL 1703020*
	verde limone RAL 1008060*
	verde foglia RAL 1206050*
	blu turchese RAL 5018
	blu bianco RAL 2408015*
	blu chiaro RAL 2606030*
	blu zaffiro RAL 5003

* RAL sfumature

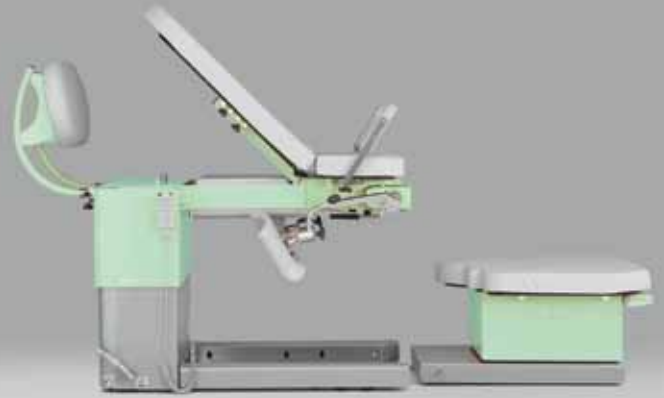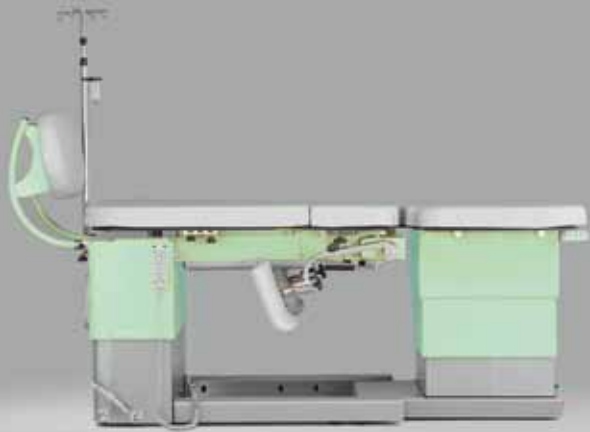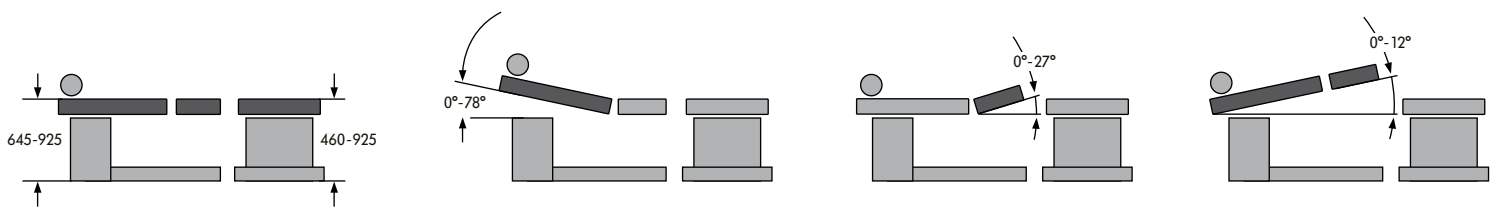



**Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG**
58734 Wickede (Ruhr)
C. P. 14 61
58739 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
Germania
Tel. +49 (0) 23 77 84-0
Fax +49 (0) 23 77 84-135
www.schmitz-soehne.de
export@schmitz-soehne.de

**Sede commerciale
in Italia:**
SCHMITZ ITALIA S.r.l.
Daniela Capeletti
Piazza Garibaldi 20
15076 Ovada (AL)
Tel. 01 43-8 03 50
Fax 01 43-83 42 53
cell 3 49-6 33 87 23
info@schmitz-italia.it
www.schmitz-italia.it

Stabilimenti in Svizzera:
SCHMITZ AG
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen
Tel. 0 52-6 43 25 05
Fax 0 52-6 43 26 91
f.poncet@bluewin.ch

SCHMITZ AG
François Poncet
Chemin du Bois 32
1020 Renens VD
Tel. 0 21-6 91 74 66
Fax 0 21-6 91 74 62
cell 0 79-2 12 83 34
f.poncet@bluewin.ch

Tutti i prodotti contrassegnati dal marchio CE, in combinazione con i nostri accessori, soddisfano i requisiti della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici



Per le specifiche di destinazione d'utilizzo consultare le relative istruzioni allegate al prodotto!



Il programma completo Schmitz



Ginecologia, urologia e proctologia: attrezzature perfette e funzionali



DIAMOND
Il top di qualità fra i tavoli operatori



Tavoli operatori OPX per sala operatoria e day-surgery: flessibilità ed affidabilità esemplari



varimed®
Arredamento per sale operatorie e aree critiche



STL 285, STS 282, STX 280
Barelle per trasporto pazienti in emergenza, pronto soccorso, terapia intensiva e radiologia



varimed®
I carrelli funzionali – i nostri esperti per il lavoro quotidiano in clinica



varimed®
Arredamento medico per visite e trattamenti