


# varimed® Lettini da visita e trattamenti regolabili in altezza

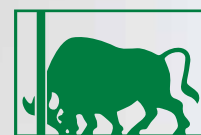

**SCHMITZ**

*A Sense of Confidence*


**Nuovo**



- Lavoro ergonomico grazie alla regolazione in altezza del piano
- Nessuno spostamento della superficie d'appoggio durante la regolazione in altezza
- Libertà di movimento intorno alla base grazie alla sua conformazione



# varimed® Lettoni da visita e trattamenti regolabili in altezza C€

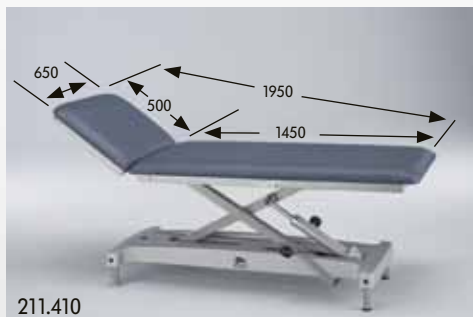

211.410



211.420 con 200.025



1



2



3

## Descrizione

### Letto da visita e trattamenti C€ 211.410

regolabile in altezza con sistema idraulico da 500 a 920 mm mediante pedale. Lato poggiatesta regolabile mediante molla a gas da -20 a +40 gradi. Imbottitura 70 mm, in due sezioni, colore dell'imbottitura a scelta secondo scheda colori Schmitz. Struttura verniciata a polveri, alluminio brillante RAL 9006, alluminio grigiastro RAL 9007 o bianco grigiastro RAL 9002. Rivestimento della base in materiale plastico, grigio argento. Carico di lavoro sicuro 225 kg.

### Letto da visita e trattamenti C€ 211.420

come modello 211.410, ma regolabile in altezza elettricamente da 500 mm a 920 mm mediante comando a pedale. Blocco di sicurezza per attivare/disattivare l'elemento di comando. Cavo di collegamento 2,40 m con spina. Su richiesta disponibile anche con pulsantiera manuale al posto del comando a pedale.

## Accessori:

1

### Versione su ruote 200.025

4 ruote doppie chiuse Ø 100 mm, di cui 2 antistatiche, bloccaggio centrale per ogni asse, una ruota direzionale. (Il range di regolazione in altezza resta inalterato.)

2

### Sponde laterali (coppia) 200.040

lung.: 990 mm, posizionabili al di sotto del livello della superficie d'appoggio, verniciate a polveri colore alluminio bianco RAL 9006

3

### Supporto per comando a pedale 200.035

per lettino da visita e trattamenti 211.420, in acciaio, verniciato a polveri colore alluminio brillante RAL 9006, fissaggio sul lato lungo del lettino, installabile a posteriori

### Portarotoli 200.093

per rotoli fino a 590 mm di larghezza, fissabile solamente dal lato piedi

### Rotolo di carta 200.103

largh. 500 mm

### Protezione degli angoli 200.041

in materiale plastico, colore grigio, installazione in tutti e quattro gli angoli del materassino (senza fig.)

### Poggiatesta con fessura per naso 200.050

### Sovrapprezzo per verniciatura della struttura 200.653

secondo scheda colori

## Similpelle:

4 tonalità di colore in versione classic, senza sovrapprezzo

13 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo 200.852).

Fare riferimento alle pagine 26 e 27 del nostro prospetto n. 70.

Rivestimento di serie delle strutture RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007.

Si prega di precisarlo sull'ordine.

È fatta riserva di apportare variazioni alla fabbricazione e alle misure.

Prospetto Schmitz n. 19, 11.2011 I

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG, Zum Ostenfeld 29, 58739 Wickede (Ruhr), Germania  
Tel. +49 (0) 2377 84 0, Fax +49 (0) 2377 84 135, www.schmitz-soehne.com